

Séquence UF seule

ORDRE DE SERVICE

- Si la dialyse doit être prolongée (prise de poids trop importante), il faut faire de l'**ultrafiltration (UF) seule**.
- L'UF isolée ne doit pas dépasser 150% de l'UF définie pour le patient en dialyse.

Exemple :

- UF définie pour le patient en dialyse = 1 litre / heure
- UF seule = 1'500ml /heure, soit 750ml / ½ heure

- Il faut débiter la séance d'hémodialyse par l'UF seule pendant ½ à 1 heure au maximum, puis poursuivre par l'hémodialyse habituelle.
- UF seule = **au maximum 2 litres /heure**

Prof. P.-Y. Martin Mme G. Droulez Dr C. Stoermann Chopard

- **Avec Intégra :**

Effectuer une mise en marche normale avec un bain et une cartouche. Régler le volume et le temps en fonction de l'OM et appuyer sur l'icône « UF seule » Le contrôle de la TA doit être rapproché

- **Avec Frésenius :**

Effectuer une mise en marche normale avec un bain et une cartouche, appuyer sur Menu Ultrafiltration, déplacer le curseur pour programmer « UF à perdre seule ». Programmer le temps avec « durée UF seule ». Le taux d'UF est calculé en fonction des 2 paramètres. Valider la programmation avec « confirmer ». Et commencer l'UF seule en démarrant « Ultrafiltration marche/arrêt »

- **Avec Dialog+ Braun :**


Effectuer une mise en marche normale avec un bain et une cartouche. Régler le volume et le temps en fonction de l'OM et appuyer sur :



puis



puis

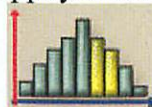

puis choisir le profil N°4

ou

l'icône « UF séquentielle » monter la valeur à 200% pour avoir la barre jaune en haut. Le contrôle de la TA doit être rapproché.

Il faut débiter la séance d'hémodialyse par l'UF seule pendant 30 mn à 1 heure au maximum puis continuer par la dialyse habituelle en rallongeant la séance d'autant. Il est déconseillé au patient de prendre le petit-déjeuner pendant la période d'UF seule car cela va favoriser encore plus une chute de TA.